

## C3雙柱排氣櫃說明

### 簡介

禮學社「高效能排氣櫃」採專利節能低風量後吸式流場設計多種規格，櫃體創新採用高密度板具科技感外觀原創設計。採用智慧型線控自動控制技術，故學習及操作方式不僅簡單，且使用功能符合歐美相關法規之要求。產品選擇配件可符合選購時各種不同需求，並提供安裝所需配合的廢氣排放及污染防治設計及施工，提高產品性能的可靠度及售後服務等附加價值，同時無論少量多樣或量產的製程，均可滿足市場上各種不同的需求。

### 說明

**規格:**薄壁雙柱，單片上推門，前端配重，耐蝕板內襯。

**用途:**適用於毒性物質、VOC、合成等危險化學物質實驗。

**特點:**門柱設置電源及氣體供應，前端配重易維修，可加裝自動降門或給氣門檻。

**其他:**另有雙面型，如有需求請進一步洽詢本公司人員。

### 中小企業創新研究獎評語

本標的係改良傳統型結構所開發之具創新層流排氣櫃，可以防止櫃內化學氣體外洩，並可有效隔開櫃內、外氣流，在安全使用與環保節能方面確有貢獻。

藉由客製化與統包方式，創新設計櫃門動態控流機構，並依使用環境、操作方式與配件規格，發展成系列性機型；其結合客戶需求、現場組裝與售後服務之整合訴求，具市場獨特性與競爭優勢。


本標的經過SGS等第三者驗證，其性能與安規亦符合歐美規定之最高等級。

### 台灣精品獎評語

產品性能達國際技術指標，操作性安全、耐用且方便上手。

產品能適切展現外觀、技術與功能之整合性價值。

技術創新兼顧環保、綠能，創造產品新價值。

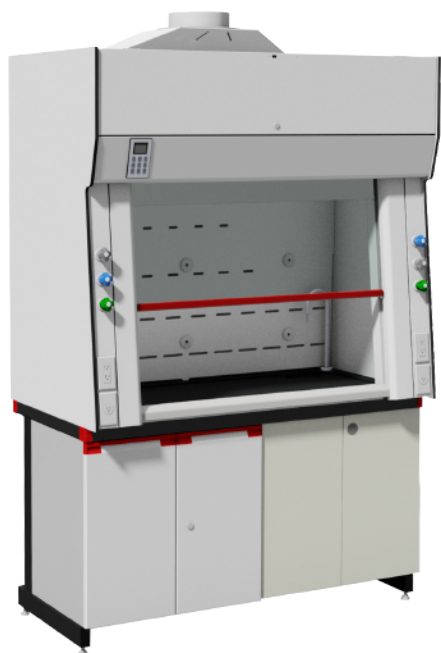


### C3雙柱排氣櫃

圖示1.5M長排氣櫃屬本公司「高效能排氣櫃」系列的C3型。本系列有多種尺寸規格選擇，請詳背面說明。




★為常用尺寸


寬度:1.2M  
廠交單價:

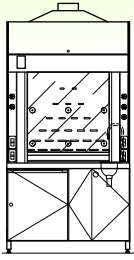


★寬度:1.5M  
廠交單價:

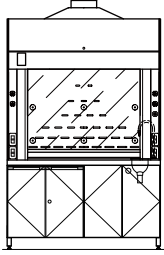


★寬度:1.8M  
廠交單價:

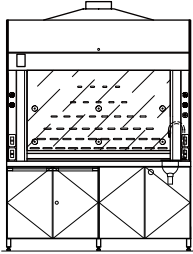



★寬度:2.1M  
廠交單價:

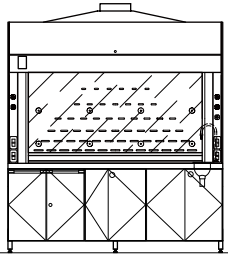

寬度:2.4M  
廠交單價:

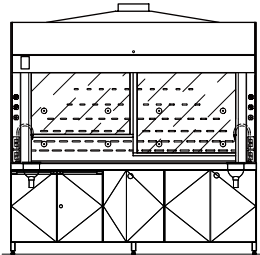

寬度:3.0M  
廠交單價:

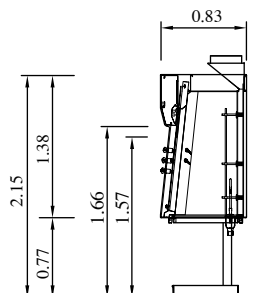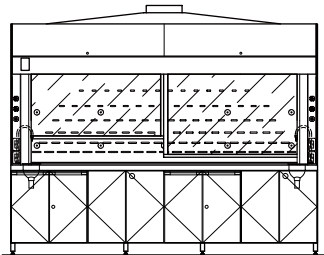

側立面圖

F238

## C3雙柱排氣櫃配件選擇

### 基本配件

- 1.0 上櫃體(進氣門檻)
- 1.1 上推門(1組)
- 1.2 日光燈(1組)
- 1.3 插座(4組)
- 1.4 集氣箱

註：以上不含現場外接水電風管。

### 2.0 智慧型機電控制

(為節能必備裝置，包括低風速警報、電路保護裝置、VAV電路裝置，可提供中央監視輸出訊號。)

註 1：廠交單價包括以上基本配件。

註 2：現場安裝、外接水電、風管過濾箱、風機、現場檢驗等按交運地點核實計算。

### 選擇配件

各種氣體供應種類及數量

- 腳架  80H(標準)  90H
- 貯酸底櫃 含抽氣管
- 溶劑底櫃 含抽氣管
- 開門櫃
- 抽屜櫃
- 不銹鋼蒸餾架
- 門防爆貼膜
- 手自動滅火器
- 給氣門檻
- 自動降門

- 遙控閥
- 外接氣體配管
- 給排水
- 過濾設備
- 1. 活性炭
- 2. 水洗箱
- 品質檢驗
- 交貨前的TAF檢驗機構型式檢定及報告
- 安裝後的TAF檢驗機構面速度及可視化檢驗報告

註：以上配件為符合國際通用規範常用裝置，請按需要選用。

### 服務

1. 現場施工服務需另辦理現場勘察及工程設計與計算
2. 驗收時附完工點檢及表面風速測試
3. 除耗材外保固期為3年及不限期售後服務

客戶名稱：\_\_\_\_\_

連絡人：\_\_\_\_\_

電話：\_\_\_\_\_

安裝地點：\_\_\_\_\_

選擇表填寫人：\_\_\_\_\_