

禮學社® 實驗室淨氣型貯櫃

未來產品與本型錄有出入時，以實品為準，本公司保留產品修改權力。

法國原廠 **erlab** 全球唯一授權合作

滿足實驗室化學物質分類貯存的安全、人員的健康，禮學社提供多種淨氣型貯櫃，不需要外接風管並可移動位置，十分方便。

法國原廠erlab供應本產品
獨一無二的靈活模組過濾
系統適合不同性質化學品
貯存

過濾器自動報警器用於監
測過濾飽和狀況

門感應器用於提醒用戶
隨手關上櫃門

不銹鋼鋼琴鉸鏈

三點固定式不鏽鋼門門
附鎖

智能化技術

簡易--通過頂部光環閃爍情況進
行訊息傳遞，從而表明當前運行
狀態

節能

只需一個標準的插座，
能耗僅75W


Safer
更安全 更智能



Labtech
www.labtech.com.tw

GS1 淨氣型強酸貯櫃

貯存強酸或強鹼等化學物質專用櫃

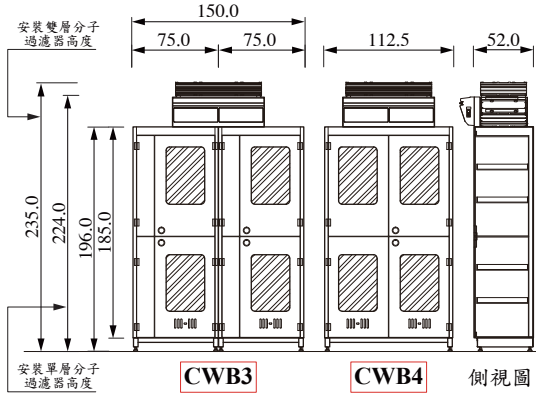

規格說明:

櫃子全部採用耐強酸強鹼的PP材料。(櫃體: PP板; 視窗: 透明PVC板)


櫃子分上下二層, 每層內含2片可調整高度的棚板, 棚板可容納10.0(或15.5)公升溢出的液體; 櫃體底部可容納12.0(或18.5)公升溢出的液體。

平面附鎖門扣把手。

櫃門附可調整的進氣口, 櫃身頂上裝置erlab風車濾材組。

GS2 淨氣型化學品貯櫃

貯存一般化學物質專用櫃(有視窗)

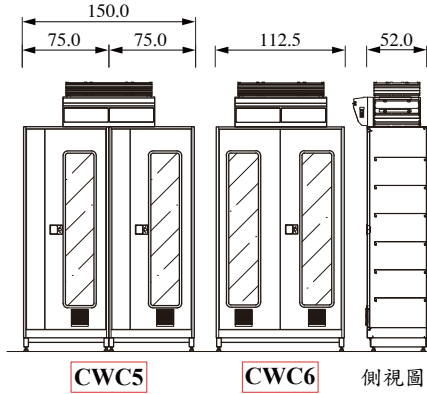

規格說明:

櫃內襯及棚板為SUS316不銹鋼材質, 可耐一般化學物。(櫃體外殼: CGCC板; 內襯: SUS316板; 視窗: 5mm平板玻璃)


透氣圓孔棚板, 可調整安裝高度位置。

不銹鋼製三點式平面附鎖門把手, 關門時門自動與櫃體上下卡合。

櫃體門扇下端附進氣口, 並有防靜電接地裝置, 櫃身頂上裝置erlab風車濾材組。

GS3 淨氣型化學品貯櫃

貯存一般化學物質專用櫃

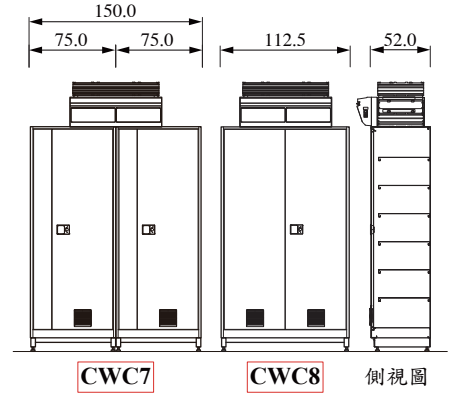

規格說明:

櫃內襯及棚板為SUS316不銹鋼材質, 可耐一般化學物。(櫃體外殼: CGCC板; 內襯: SUS316板)

透氣圓孔棚板, 可調整安裝高度位置。

不銹鋼製三點式平面附鎖門把手, 關門時門自動與櫃體上下卡合。

櫃體門扇下端附進氣口, 並有防靜電接地裝置, 櫃身頂上裝置erlab風車濾材組。

空氣處理量	200-230 m ³ /h	電壓 / 頻率	適用電壓: 100-240V ; 內部電路: 24V-DC/50-60Hz	功率	75W
-------	---------------------------	---------	---------------------------------------	----	-----

GS4 小型淨氣型貯櫃

適合液體化學物質的貯存



簡單、經濟、安全, 給使用者及時全面的保護, 附鎖玻璃橫拉門, 可吊掛實驗桌上或固定在牆上。

音量	45 dba
空氣處理量	75 m ³ /h
空氣交換率	5.2 times / min
電壓 / 頻率	220 V / 50 hz
消耗功率	20 W
電流	0.17 A

過濾器材: (耗材)

型號	品名規格	應用
BHG2	活性炭過濾器 GF4 AS	主要針對有機氣體, 無機氣體次之
BHG3	活性炭過濾器 GF4 BE	主要針對有機和無機氣體
BHG4	活性炭過濾器 GF4 F	主要針對甲醛
BHG5	活性炭過濾器 GF4 K	主要針對氨
BHG6	HEPA 14 過濾器 GF4 HP	高效粒子過濾器 適用於過濾粉塵顆粒及潔淨室使用
BHG7	HP 預濾器	與HEPA 過濾器搭配使用
BHG8	HP 連接框	與HEPA 過濾器搭配使用
過濾器自動警報器(選配)依問卷結果推薦使用		
HGD07	Molecode S	針對有機類的飽和檢測
	Molecode A	針對無機類的飽和檢測
	Molecode F	針對甲醛的飽和檢測

過濾器的選擇:

購買前, 請您先填寫問卷, 我們將透過您填寫的問卷, 協助您選擇最適合的過濾器(耗材)型號及評估過濾器可能使用壽命。

禮學社股份有限公司 TEL: +886-2-2222-8687

地址: 新北市中和區連城路 232 -1號 3樓

Labtech
www.labtech.com.tw